

Finger



Capener-Schiene Extension

Art. Nr. 502 / MiGeL. Nr. 23.20.01.00.1

Carpener Schiene mit seitlicher Spiralfeder und verbesserter Extension der PIP-Gelenke. Distale und proximale Polster erhöhen den Tragekomfort und verteilen den Druck gleichmässig, während das distale Klettband den Finger fixiert und in der richtigen Position hält. Modell 502 erzeugt eine wesentlich höhere Extensionsspannung als alle anderen Varianten.

Indikationen: Extension der PIP-Gelenke

X-Hard



Grössen in cm:
Länge

A	B	C	D
6.4	7.0	7.6	8.3

Messen Sie bitte bei gestreckten Fingern von der Handfalte bis zur distalen Fingerfalte.



Fingerquengel Extension lang

Art. Nr. 501 / MiGeL. Nr. 23.20.01.00.1

Fingerquengel zur Streckung der PIP-Gelenke. Leichter Extensionseffekt auf die MCP-Gelenke. Distale und proximale Polster erhöhen den Tragekomfort und verteilen den Druck gleichmässig. Durch vorsichtiges Zusammendrücken bzw. Biegen der Feder, kann die Spannung erhöht oder vermindert werden.

Indikationen: Extension der PIP- und MCP-Gelenke

Medium



Grössen in cm:
Länge
Umfang

AA	A	B	C	D
5.7	6.7	7.6	8.9	10.2
2.2	2.2	2.5	2.9	2.9

Messen Sie bitte bei gestreckten Fingern von der Handfalte bis zur distalen Fingerfalte.



Fingerquengel Extension kurz

Art. Nr. 504 / MiGeL. Nr. 23.20.01.00.1

Gleiche Eigenschaften wie Art. 501 nur in kürzerer Ausführung. Das Design des Artikels 504 verhindert die Beeinträchtigung der MCP-Gelenke während der Extension der PIP-Gelenke. Die kleinen Grössen können ebenfalls zur Extension der DIP-Gelenke eingesetzt werden.

Indikationen: Extension der PIP- bzw. DIP-Gelenke


Medium



Grössen in cm:
Länge
Umfang

AA	A	B	C	D
4.4	4.8	5.1	5.7	6.7
2.2	2.2	2.5	2.9	2.9

Messen Sie bitte auf der volaren Seite von der MP-Gelenksfalte bis zur distalen Fingerfalte.

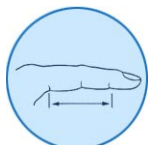



Acu-Fingerquengel Extension

Art. Nr. 507 / MiGeL. Nr. 23.20.01.00.1

Model 507 besitzt eine leicht höhere Federspannung als Model 501 und ist hervorragend geeignet, um den letzten Grad der PIP-Gelenkextension wiederzuerlangen. Das leicht gebogene PIP-Polster verteilt den Druck gleichmässig.

Indikationen: Extension der PIP-Gelenke, Kontraktion d. Fingerbeuger, Fingersteifheit, Boutonniere-Deformationen

Hard 

Grössen in cm:
Länge
Umfang

	AA	A	B	C	D
Länge	5.7	6.7	7.6	8.6	9.5
Umfang	2.2	2.2	2.5	2.9	2.9

Messen Sie bitte bei gestreckten Fingern von der Handfalte bis zur distalen Fingerfalte.



Fingerquengel Extension light

Art. Nr. 602 / MiGeL. Nr. 23.20.01.00.1

Model 602 unterstützt die Extension der PIP- bzw. DIP-Gelenke. Die leichte Spannung beeinflusst ebenfalls die PIP-, DIP- und IP-Gelenksflexion positiv. Sollte es die Indikation verlangen, können aufgrund des sehr schmalen Designs zwei Fingerquengel nebeneinander getragen werden.



Indikationen: Extension der PIP- oder DIP-Gelenke, Fingerquetschungen, Verbrennungen, Boutonniere-Deformationen

Soft 

Grössen in cm:
Länge
Umfang

	AA	A	B	C	D
Länge	3.2	3.8	4.4	5.7	7.0
Umfang	1.3	1.3	2.2	2.5	2.9

Messen Sie bitte auf der volaren Seite von der MP-Gelenksfalte bis zur distalen Fingerfalte.

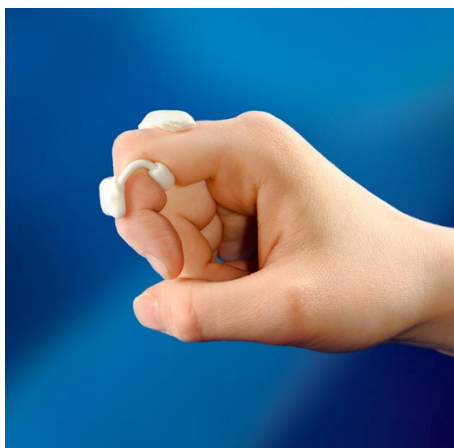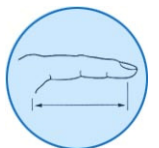

Fingerquengel Flexion light

Art. Nr. 601 / MiGeL. Nr. 23.20.01.00.1

Fingerquengel zur Flexion der PIP und DIP-Gelenke. Freibleibende Fingerspitze gewährleistet uneingeschränkte Funktionalität. Das sehr schmale Design erlaubt es, zwei Fingerquengel nebeneinander zu tragen.


Indikationen: Flexion der PIP- und DIP-Gelenke, Effekte durch Fingerquetschungen

Soft 

Grössen in cm:
Länge

	AA	A	B	C	D
Länge	3.2	3.8	4.4	5.7	7.0

Messen Sie bitte auf der volaren Seite von der MP-Gelenksfalte bis zur distalen Fingerfalte.

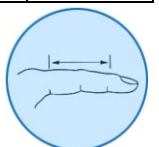



Fingerbandage „Buddy“

Art. Nr. 804 / MiGeL. Nr. 23.20.01.00.1

Die Fingerbandage „Buddy“ verbindet zwei Finger miteinander, wobei der starke Finger dem verletzten Finger Unterstützung bietet. „Buddy“ wurde aus einem weichen und komfortablen Material gefertigt. Das Klettverschlussystem ermöglicht ein einfaches Anlegen. Durch Zuschneiden des Bandes kann eine individuelle Anpassung erfolgen.

Indikationen: Fingergliedfrakturen, Sehnenentzündungen

Größen in cm:

Universal
6 STK/Packung



Fingerschiene „Hugger“

Art. Nr. 670 / MiGeL. Nr. 23.20.01.00.1

Fingerschiene zur dynamischen sowie statischen Unterstützung der Extension von PIP- und DIP-Gelenken. Auf der dorsalen Seite kann ein dynamischer Plastikstab bzw. ein statischer Aluminiumstab angebracht werden. Die spezielle Schnürtechnik erlaubt ein individuelles Einstellen der Kompression. Einsatz am Finger, einzelner Gelenke oder des Daumens.

Indikationen: Fingerfrakturen, Sehnenentzündungen, Verstauchungen und allgemeinen Sportverletzungen

Größen in cm:
Länge

AA	A	B	C	D
3.8	5.1	6.4	7.6	8.9

Messen Sie bitte gemäss der Zeichnung.

