


# Thermoplastisches Material Turbocast Ortho

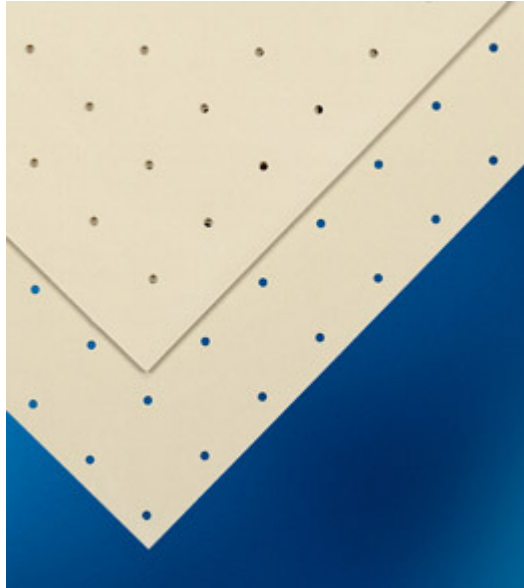

- Durch Erhitzen verformbares Schienenmaterial ohne Beschichtung
- Erhitzen im Wasserbad bei 60°-65° oder Heissluft
- gut verformbar
- Memory Effekt etwas stärker als Turbocast, schon im erwärmten Zustand
- Sehr rutschfest
- Sehr gut schleifbar
- Klebt aufeinander, aber nicht auf der Haut
- Angenehme Verarbeitung

## Erhältlich in:

2,0 mm, 3,2 mm und 4,0 mm

Ohne Perforation, mini-, micro- oder multiperforiert

Farbe: beige

Größe: 60 x 45 cm

## Bestellcode:

A Turbocast Ortho	TO	
B Dicke	2,0 mm = 20 4,0 mm = 40	3,2 mm = 32
C Perforation	Non perfo = 0 Mini perfo = 2	Micro perfo = 1 Multi perfo = 3
D Farbe	Hautfarbig = 0	

Beispiel: Sie möchten Turbocast Ortho, 3,2 mm, non perforiert, beige

Ihre Art. Nr.:            A    B    C    D  
                                  TO  32  0    0