

WHOOPY

Der „reverse Walker“



Die WHOOPY Gehhilfe wird hinter den Benutzer gestellt und während er sich vorwärts bewegt, kann er sich hinten auf den Griffen abstützen. Der entscheidende Vorteil des „reverse Walkers“ ist die gesteigerte Stabilität. Da der Benutzer zwischen den Griffen steht, bietet das System Halt, Stütze und Sicherheit. Ausserdem geht der Benutzer so aufrechter, also in einer natürlicheren Haltung.

Folgende Schlüsselbegriffe beschreiben den WHOOPY am besten: **Stabilität, Qualität und Nachhaltigkeit.**

Die neue Gehhilfe ist aus Stahl gebaut, ist sehr stabil und hält mehr Gewicht aus als die leichtgewichtigen Gehhilfen. Letztere sind vorwiegend aus Aluminium hergestellt und daher leicht zu heben. Dafür sind sie aber weniger stabil und können weniger Last aushalten als Gehhilfen aus Stahl. Dank der innovativen technischen Konstruktion ist WHOOPY einfach und handlich zusammenklappbar, so dass er leicht transportiert und gelagert werden kann.

Die WHOOPY Gehhilfe bietet in der Grundversion:

- starke Stahlkonstruktion
- drei Grössen
- individuell in Höhe und Breite einstellbare Griffe
- schwenk- und arretierbare Vorderräder
- Hinterräder mit Rückfahrt-Stopper
- zusammenklappbar

Technische Details:

| | Grösse 1 | Grösse 2 | Grösse 3 |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|
| Griffhöhe: | 45 – 75 cm | 55 – 87 cm | 65 – 99 cm |
| Gestellbreite: | 62 cm | 69 cm | 73 cm |
| Gestelllänge: | 64 cm | 78 cm | 91 cm |
| Gewicht: | 11 kg | 12,5 kg | 14 kg |
| Körpergrösse: | 65 – 115 cm | 95 – 130 cm | 110-170 cm |
| Farbe des Gestells: | gelb | rot | blau |
| Material des Gestells: | Beschichteter Stahl mit Chromteilen | | |

Zubehör:




Kippschutz



Korb



Sitz (rückklappbar)

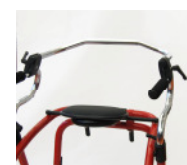

Rückenrohr