

Sofie

Das individuell mitwachsende Sitzsystem



Abb. Grundmodell Sofie Grösse 1, zusätzlich mit Kopfstütze Muschelform, Rückenrohre ohne Schiebegriff, Hüft- und Seitenpelotten sowie anatomischer Sitzfläche

- **Sofie ist eine mitwachsende Sitzeinheit, lieferbar in drei Grundgrössen**
- Das umfassende und vielseitige Zubehör ermöglicht eine individuelle Ausstattung und Anpassung
- Sitztiefe und -breite sowie die Rückenhöhe lassen sich leicht einstellen und gehören zu den Standard-Funktionen
- Das Sitzpolster kann mit einer anatomischen Ausformung gewählt werden und ermöglicht so auch komplexe Sitzversorgungen
- Sofie ist auf alle handelsüblichen Untergestelle adaptierbar
- Auf der Basis von Sofie sind Sonderbauten möglich, wie zum Beispiel das Einarbeiten individueller Körperabdrücke
- Zur Unterstützung der Sitzposition ist Sofie mit dem Fixierungssystem



Unterschiedliche Kopfstützen zur Optimierung der Stützfunktion erhältlich



Winkel- und höhenverstellbarer Rücken



Die abklappbaren Seitenpelotten bieten eine körpernahe Einstellung und erleichtern das Hereinsetzen des Kindes in das Sitzsystem



Durch die Hüftpelotten ist die Regulierung der Sitzbreite und die Einstellung einer abduzierten Sitzposition möglich



Die Armlehnen sind in der Höhe und im Winkel verstellbar




Sofie ist für die Kantelung auf Untergestellen geeignet

Technische Daten:

	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
Art. Nr.	17 00 001	17 01 001	17 02 001
Alter in Jahren:	ca. 2 – 6	ca. 2 – 8	Ab 6
Sitzbreite:	16 - 30 cm	16 - 30 cm	26 – 38 cm
Sitztiefe:	15 – 24 cm	21 – 30 cm	30 – 42 cm
Höhe kurzer Rücken:	30 cm	30 cm	40 cm
Höhe langer Rücken:	38 cm	38 cm	48 cm
Einstellbare Rückenlänge max:	45 cm	45 cm	55 cm
Rückenwinkel verstellbar:	(-)5° – 25°	(-)5° – 25°	(-)5° – 25°
Gewicht:	9 kg	9 kg	11 kg
Belastung max.:	30 kg	30 kg	50 kg

Konfiguration und Zubehör:


Rücken

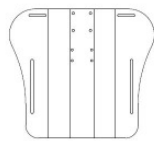

Standard-Rücken inkl. Polster und Bezug

für Gr. 0 + 1
kurzer Rücken, 30 cm
Art. Nr. 30 01 002
langer Rücken, 38 cm
Art. Nr. 30 01 003

für Gr. 2
kurzer Rücken, 40 cm
Art. Nr. 30 02 002
langer Rücken, 48 cm
Art. Nr. 30 02 003

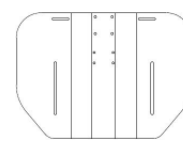

Rücken mit integrierter Oberarmführung inkl. Polster und Bezug

für Gr. 0 + 1
kurzer Rücken, 30 cm
Art. Nr. 30 01 016
langer Rücken, 38 cm
Art. Nr. 30 01 017

für Gr. 2
kurzer Rücken, 40 cm
Art. Nr. 30 02 016
langer Rücken, 48 cm
Art. Nr. 30 02 017

Kopfstützen

Kopfstütze Standard, gepolstert, höhen- und winkelverstellbar

Gr. 0 + 1 Art. Nr. 30 01 004
Gr. 2 Art. Nr. 30 02 004

Kopfstütze Seitenführung, gepolstert, höhen- und winkelverstellbar

Gr. 0 + 1 Art. Nr. 30 01 011
Gr. 2 Art. Nr. 30 02 011

Kopfstütze Muschelform, gepolstert, höhen- und winkelverstellbar

Gr. 0 + 1 Art. Nr. 30 01 012
Gr. 2 Art. Nr. 30 01 012

Seitenpelotten

Seitenpelotten gepolstert			Seitenpelotten abklappbar		
für Gr. 0 + 1	Brustbreite 16 – 23 cm	Art. Nr. 30 01 005	für Gr. 0 + 1	Brustbreite 16 – 23 cm	Art. Nr. 30 01 014
für Gr. 0 + 1	Brustbreite 23 – 30 cm	Art. Nr. 30 01 006	für Gr. 0 + 1	Brustbreite 23 – 30 cm	Art. Nr. 30 01 015
für Gr. 2	Brustbreite 26 – 32 cm	Art. Nr. 30 02 005	für Gr. 2	Brustbreite 26 – 32 cm	Art. Nr. 30 02 014
für Gr. 2	Brustbreite 32 – 38 cm	Art. Nr. 30 02 006	für Gr. 2	Brustbreite 32 – 38 cm	Art. Nr. 30 02 015

Hüftpelotten und Therapietisch

Hüftpelotten gepolstert und winkelverstellbar			Therapietisch vorsteckbar, abklappbar, abnehmbar	
für Gr. 0 + 1	Standard 21 cm	Art. Nr. 30 01 007		
für Gr. 0 + 1	Lang 30 cm	Art. Nr. 30 01 107		
für Gr. 2	Standard 28 cm	Art. Nr. 30 02 007	Gr. 0 + 1	Art. Nr. 30 01 010
für Gr. 2	Lang 37 cm	Art. Nr. 30 02 107	Gr. 2	Art. Nr. 30 02 010

Weiteres Zubehör Sitz

Knieabduktionsblock vorsteckbar, gepolstert		Kniestützpolster vorsteckbar, gepolstert		Inkontinenzbeschichtung im Sitzbereich	
				Art. Nr. 30 00 001	
Gr. 0 + 1	Art. Nr. 30 01 008	Gr. 0 + 1	Art. Nr. 30 01 009	Anatomische Anformung im Sitzbereich	
Gr. 2	Art. Nr. 30 02 008	Gr. 2	Art. Nr. 30 02 009	Art. Nr. 30 00 002	

Fussstützen

Aluminium Fussbrett mit Fersenkante, höhen- und kniewinkelverstellbar			Aluminium Fussbank mit Fersenkante, höhen-, kniewinkel- und fusswinkelverstellbar, zusätzlich hochklappbar			Fussstützen, geteilt, höhen- breiten- und kniewinkelverstellbar, zusätzlich abschwenkbar		
Gr. 1	Breite 26 cm	Art. Nr. 90 01 001	Gr. 1	Breite 28 cm	Art. Nr. 90 01 007			
Gr. 2	Breite 30 cm	Art. Nr. 90 02 001	Gr. 2	Breite 34 cm	Art. Nr. 90 02 007	Gr. 1	Breite 20 – 36 cm	Art. Nr. 90 01 006
Gr. 3	Breite 36 cm	Art. Nr. 90 03 001	Gr. 3	Breite 40 cm	Art. Nr. 90 03 007	Gr. 2	Breite 28 – 44 cm	Art. Nr. 90 02 006