

Todd

Der sportliche, agile Stehtrainer



Abb. Grundmodell Todd Grösse 1, zusätzlich mit Brustpelotte mit Seitenführung, dreidimensional verstellbaren Kniepelotten mit einstellbaren Anlagebügeln, Fersenkanten und Therapietisch

- Der fahrbare Stehtrainer Todd bietet durch die Stehposition des Nutzers über der Achse der Antriebsräder maximale Mobilität im Stehen
- Die höhen-, breiten- und tiefenverstellbaren Körperstützen ermöglichen die Anpassung an das Wachstum des Kindes oder Jugendlichen im Rumpf und den Extremitäten
- Die optimierte Greifreifenstellung ist durch den einstellbaren Radsturz sowie durch die individuell einstellbare Standposition zu erreichen
- Todd ist um bis zu 15° in die Vorlage kanelbar
- Mittels Hand-Kurbel ist die Gesässpelotte horizontal zu verstellen, um so einer vorhandenen Knie- oder Hüftbeugekontraktur entgegen zu wirken
- Die kombinierte Spinen- und Beckenpelotte positioniert in Wechselwirkung mit der Gesässpelotte das Becken und fördert dadurch die Aktivität im Rumpf und den oberen Extremitäten



Kombinierte Spinen- & Beckenpelotten in der Tiefe, Höhe und Breite einstellbar




Brustpelottenhöhe und -breite, Gesässpelottenhöhe und dreidimensionale Verstellung der Kniepelotten in der Grundeinstellung




Winkelverstellung der Mittelsäule mechanisch von 0 - 15°



Kniepelotten einzeln, dreidimensional verstellbar mit einstellbaren Anlagebügeln

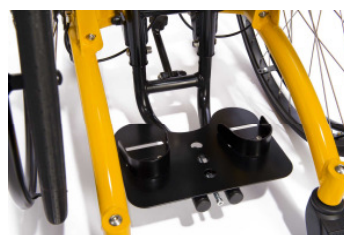

Höhen- und tiefeinstellbare Fussplatte mit in der Breite einstellbaren Fersenkanten

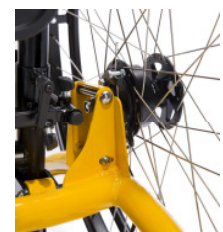

Der einstellbare Radsturz ermöglicht individuelle Griffbreiten

Technische Daten:

	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Art. Nr.:	44 01 000	44 02 000	44 03 000	44 04 000
Höhe Fussplatte* - Schritt :	35 – 47 cm	45 – 57 cm	55 – 70 cm	65 – 85 cm
Höhe Fussplatte* - Brustpelotte:	55 – 80 cm	75 – 100 cm	90 – 120 cm	110 – 140 cm
Höhe Fussplatte* - Greifreifen oben:	24" : 42 cm 28" : 52 cm	28" : 52 cm 32" : 62 cm 36" : 72 cm	36" : 72 cm 40" : 82 cm	40" : 82 cm 42" : 87 cm
Breite Greifreifen oben:	24" : 44 - 50 cm 28" : 40 - 49 cm	28" : 46 - 55 32" : 42 - 54 36" : 38 - 53	36" : 49 - 64 cm 40" : 45 - 63 cm	36" : 51 - 69 cm 40" : 49 - 69 cm
Rahmenbreite:	32 cm	38 cm	44 cm	50 cm
Breite insgesamt:	58 – 67 cm	64 – 73 cm	67 - 76 cm	73 – 82 cm
Länge insgesamt :	66 cm	73 cm	83 cm	98 cm
Winkel Mittelsäule:	0° – 15°	0° – 15°	0° – 15°	0° – 15°
Radsturz:	3°/6°/9°/12°	3°/6°/9°/12°	0°/3°/6°/9°	0°/3°/6°/9°
Radgrössen:	24"/28"	28"/32"/36"	36"/40"	40"/42"
Körpergrösse:	85 – 115 cm	105 – 140 cm	130 – 165 cm	160 – 185 cm
Belastung max.:	40 kg	60 kg	75 kg	90 kg

*Einstellung Fussplatte höchste Position, zusätzlich nach unten um 8 cm verstellbar

Rahmenfarben: Lasuritblau metallic, Melonengelb, Dormant Rot

Zubehör:

Pelotten

Brustpelotte mit Seitenführung , in der Höhe und Breite einstellbar (Brustanlage im Grundmodell enthalten)		Kombinierte Spinen- + Beckenpelotten in der Tiefe, Höhe und Breite einstellbar		Kniepelotten einzeln, dreidimensional verstellbar mit einstellbaren Anlagebügeln (Kniebeugung und -streckung)	
Gr. 1	Art. Nr. 44 01 003	Gr. 1	Art. Nr. 44 01 004	Gr. 1	Art. Nr. 44 01 005
Gr. 2	Art. Nr. 44 02 003	Gr. 2	Art. Nr. 44 02 004	Gr. 2	Art. Nr. 44 02 005
Gr. 3	Art. Nr. 44 03 003	Gr. 3	Art. Nr. 44 03 004	Gr. 3	Art. Nr. 44 03 005

Antriebsräder

Antriebsräder mit Trommelbremse und Greifreifen , pannensicher		Speichenschutz transparent	
24" für Gr. 1	Art. Nr. 44 01 006	24"	Art. Nr. 44 01 007
28" für Gr. 1 + 2	Art. Nr. 44 02 006	28"	Art. Nr. 44 02 007
32" für Gr. 2	Art. Nr. 44 03 006	32"	Art. Nr. 44 03 007
36" für Gr. 2 + 3	Art. Nr. 44 04 006	36"	Art. Nr. 44 04 007
40" für Gr. 3 + 4	Art. Nr. 44 05 006	40"	Art. Nr. 44 05 007
42" für Gr. 4	Art. Nr. 44 06 006	42"	Art. Nr. 44 06 007

Weiteres Zubehör

Breiter Gurt als Rückenstütze zur Montage an der Brustpelotte		Therapietisch aus 5mm Polycarbonat mit Rand	
Gr. 1	Art. Nr. 44 01 009	für Gr. 1 + 2	Art. Nr. 44 01 010
Gr. 2	Art. Nr. 44 02 009	für Gr. 2 + 3	Art. Nr. 44 02 010
		für Gr. 3 + 4	Art. Nr. 44 03 010

Fersenkanten in der Breite einstellbar		Fussgurte mit Klettverschluss und Umlenkrolle	
Gr. 1	Art. Nr. 44 01 011	Gr. 1	Art. Nr. 44 01 012
Gr. 2	Art. Nr. 44 02 011	Gr. 2	Art. Nr. 44 02 012
Gr. 3	Art. Nr. 44 03 011		