

Madita Maxi

Der bewährte, solide Therapiestuhl



Abb. Grundmodell Madita Maxi zusätzlich mit Hüft- und Seitenpelotten

- **Madita Maxi rundet das Madita Programm ab und ist der ideale Alltagsstuhl auch im geriatrischen Bereich.**
- Verlängerter Radstand und die Erhöhung der max. Belastung ermöglichen einen Einsatz bis 120 kg.
- Die im Grundmodell enthaltene anatomische Sitzpolsterung sowie die Einstellbarkeit in Sitzhöhe und -tiefe ermöglichen eine gute Sitzposition.
- Ohne Fussbank und mit den 100 mm Doppelaufrollen ist er ein idealer Stuhl zum Trippeln.
- Die durch zwei Gasdruckfedern unterstützte Sitzwinkelverstellung ist einfach durch ein Fusspedal nutzbar.
- Die leicht ansteckbare Fussbank ermöglicht einen angenehmen Transfer innerhalb der Räumlichkeiten.
- Individuelle Anpassungen sind durch Sonderbauten möglich.
- Untergestell Weissaluminium (RAL 9006).



Die stabile Mittelsäule und die Abstützung der Kantelung garantieren die hohe Stabilität



Ansteckbares Fussbrett für den Transfer oder die Positionierung der Füße




Die anatomische Sitzfläche bildet die Basis für eine gute Sitzposition

Technische Daten:

Art. Nr.	30 03 000
Sitzbreite:	34 – 44 cm
Sitztiefe:	36 – 47 cm
Sitzhöhe:	45 – 57 cm
Unterschenkellänge:	18 – 45 cm
Sitzwinkel:	(-)5° – 30°
Rückenwinkel:	(-)5° – 25°
Länge Grundgestell:	87 cm
Breite Grundgestell:	66 cm
Gewicht:	26 kg
Belastung max.:	120 kg


Konfiguration und Zubehör:

Rücken

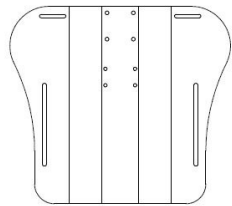

Standard-Rücken inkl. Polster und Bezug

kurzer Rücken, 40 cm Art. Nr. 30 02 002
langer Rücken, 48 cm Art. Nr. 30 02 003

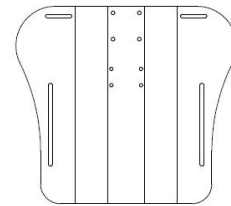

Maxi-Rücken aus 4 mm Aluminiumblech inkl. Polster und Bezug

kurzer Rücken, 40 cm Art. Nr. 30 03 002
langer Rücken, 48 cm Art. Nr. 30 03 003

Kopfstützen

Kopfstütze Standard, gepolstert, höhenverstellbar

Art. Nr. 30 03 004

Kopfstütze Seitenführung, gepolstert, höhen- und winkelverstellbar

Art. Nr. 30 02 011

Kopfstütze Muschelform, gepolstert, höhen- und winkelverstellbar

Art. Nr. 30 02 012

Seitenpelotten

Verstärkte Seitenpelotten gepolstert

Brustbreite 32 – 38 cm Art. Nr. 30 03 006
Brustbreite 38 – 44 cm Art. Nr. 30 03 106

Hüftpelotten

Hüftpelotten gepolstert und winkelverstellbar

Standard 37 cm Art. Nr. 30 03 007
Lang 46 cm Art. Nr. 30 03 107

Weiteres Zubehör

Knieabduktionsblock vorsteckbar, gepolstert

Art. Nr. 30 02 008

Therapietisch vorsteckbar, abklappbar und abnehmbar

Art. Nr. 30 02 010

Inkontinenzbeschichtung im Sitzbereich

Art. Nr. 30 00 001

Einsteckbare Radstandsverlängerung

Art. Nr. 90 03 010

Holz-Fussbank, höhen- und fusswinkelverstellbar, zusätzlich hochklappbar

Art. Nr. 30 03 015

Aufsteckbares Fussbrett, Höhe ca. 8 cm über dem Boden

Art. Nr. 30 03 016