

Sicherheitssystem JAZZ EASyS

Der flexible Begleiter mit der patentierten Sicherheit



Das Sicherheitssystem *JAZZ EASyS* ist der flexible Begleiter für den Alltag. Das EASyS System vereint die optimalen Einstellmöglichkeiten eines Sitzsystems mit der grösstmöglichen Kippsicherheit eines Reha-Wagens.

Sicherheit:

JAZZ EASyS verfügt über ein einmaliges patentiertes Sicherheitssystem.

- mit BSS® Balance Safety System (beim Verstellen der Rückenlehne verändert sich automatisch der Schwerpunkt)
- Crash-Set für den Transport im Fahrzeug
- Reflektoreinheiten auf Polster und Schlupfsack erhöhen die Sicherheit bei Dämmerung und Dunkelheit



Ergonomie:

Die ergonomischen Drehpunkte im Hüft- und Kniebereich sorgen in jeder Sitzposition für optimale Passgenauigkeit.


- ergonomische Sitzwinkel
- mitwachsend
- durch Zubehör erweiterbar



Leichtigkeit mit grosser Robustheit:

Durch ein Klick-System lässt sich die Sitzeinheit leicht und schnell vom Fahrgestell trennen in die Gegenfahrtrichtung drehen oder mit einem anderen Untergestell kombinieren.

- Sitzadapter mit Sicherheitsverschluss
- geringes Gewicht
- langlebig

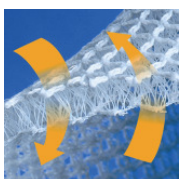

Komfort:

Optimales Wohlfühlen durch feststellbare Federung im Sitzbereich und einen klimatisierenden Sitzbezug.

Einfacher Transport:

Für den Transport lässt sich das Sicherheitssystem einfach und kompakt zusammenfallen.



Masse und Gewichte		Grösse 1	Grösse 2
	Sitztiefe	19 - 30 cm	27 - 38 cm
	Sitzbreite	19 - 31 cm	25 - 36 cm
	Rückenhöhe	40 - 65 cm	53 - 73 cm
	Sitzneigung	-10° bis +45°	-10° bis +40°
	Sitzhöhe	48 cm	54 cm
	Gesamtmass (B x H x L)	60 x 104 x 100 cm	70.5 x 111 x 111 cm
	Faltmass (B x H x L)	60 x 50 x 88 cm	70.5 x 52 x 99 cm
	Schiebegriffhöhe	92 - 114 cm	92 - 120 cm
	Radgrösse Schwenkräder (vorne)	7,5"	7,5"
	Radgrösse (hinten)	10"	10"
	Belastbarkeit	35 kg	40 kg
	Gewicht (inkl. Sitzeinheit)	15,9 kg	18,6 kg

Zubehör		Grösse 1	Grösse 2
	Kopfstütze	Art. Nr. 6624	Art. Nr. 6724
	Stützfläche (H x T)	13 x 11 cm	15 x 14 cm
	Verstellbereich (zueinander)	17 – 27 cm	20 – 28 cm
	Hosenträgergurt	Art. Nr. 6629	Art. Nr. 6629
	Beckengurtlänge	15 – 102 cm (Öse bis Öse)	15 – 102 (Öse bis Öse)
	Schultergurtlänge	15 – 60 cm (Öse bis Schnalle)	15 – 60 cm (Öse bis Schnalle)
	Thoraxpelotten, flexibel mit Brustgurt	Art. Nr. 6633	Art. Nr. 6633
	Stützfläche	9 x 19 cm	9 x 19 cm
	Gurtlänge	26.5 cm	26.5 cm
	Abduktionsblock	Art. Nr. 6620	Art. Nr. 6720
	Grösse (B x H x L)	6 x 9 x 10 cm	7 x 10.5 x 11 cm
	Therapietisch, transparent	Art. Nr. 6628	Art. Nr. 6728
	Grösse (B x T)	56 x 33.2 cm	60 x 36.2 cm
	Höhe zur Sitzfläche	15 – 22 cm	15 – 22 cm
	Winkleinstellung	ca. 27 °	ca. 27 °
	Tiefeneinstellbereich	16 cm	19 cm
Bauchausschnitt (B x T)	41 x 14 cm	45.5 x 17.5 cm	
	Regencape	Art. Nr. 6340	Art. Nr. 6540
	Decklänge (ohne Kapuze)	125 cm	140 cm
	Sonnenschirm	Art. Nr. 6643	Art. Nr. 6643
	Durchmesser	65 cm	65 cm
	Höhe	75 cm	75 cm